



# Verso

Lekki, adaptowalny  
wózek inwalidzki z  
napędem elektrycznym

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO  
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

**VERMEIREN**  
we care for you


# Verso

## Lekki, adaptowalny wózek inwalidzki z napędem elektrycznym

Verso to ultra lekki, zwinnie i wszechstronny wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, który stawia na lekkość konstrukcji a zarazem konfigurowalność. Stworzony z połączenia trwałej aluminiowej ramy manualnego wózka z zaawansowanymi funkcjami napędu elektrycznego na tylnych kołach Verso oferuje niezwykle możliwości. To co go wyróżnia, to nie tylko wymienna bateria litowo-jonowa i większa wygoda czy łatwość użytkowania. To przede wszystkim innowacyjność konstrukcji, która poza dostosowaniem go do indywidualnych wymagań pacjenta oferuje unikatową na rynku w tej kategorii możliwość szybkiej zamiany Verso w wózek manualny.

**VERMEIREN**  
we care for you



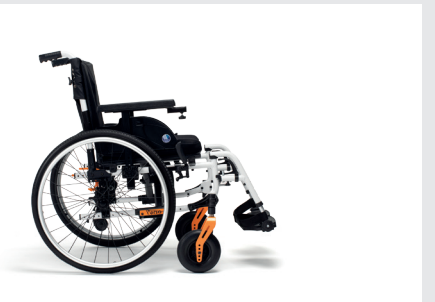



# W STANDARDZIE



# ŁATWY W UŻYCIU

Idealna prostota. Verso to wszystko czego potrzebujesz! Złóżysz i rozłożysz go w ciągu kilku sekund, gdyż wszystkie części są łatwe do przenoszenia i niezbyt ciężkie. Ułatwia to transport m.in. w samochodzie. Montaż jest łatwy dzięki naszemu systemowi Click&Drive. Żadne narzędzia nie będą Ci potrzebne - po prostu podłącz napęd i bądź gotowy do jazdy! Dzięki naszej wymiennej baterii można ładować ją kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz.



## Verso spełnia normy do transportu lotniczego!

Wystarczy wyłączyć akumulator, a wózek będzie mógł latać w samolocie. Informacje dotyczące transportu zawsze znajdują się w instrukcji obsługi.

# ŁATWY W PODRÓŻY

Unikalną cechą Verso jest odłączany silnik i blok akumulatora stanowiące jednostkę napędową. Odłączenie ułatwia przechowywanie oraz transport. Zarówno rama jak i zespół napędowy Verso posiadają dodatkowe kółka, które zapobiegają uszkodzeniom i umożliwiają łatwe manewrowanie nimi po rozłączeniu. Siedzisko można łatwo złożyć tak jak w każdym z naszych ręcznych wózków inwalidzkich. Idealny do transportu w bagażniku samochodu lub do przechowywania w domu.



# LEKKI

**31,3 kg**

Waga całkowita



**9,9 kg**

Waga transportowa  
(bez poduszki, podnóżka i  
podłokietnika)



**16,2 kg**

Najcięższa  
część



**Dbamy o Ciebie... I plecy Twoje lub Twojego opiekuna!**

Verso to bardzo lekki wózek inwalidzki z napędem ważącym zaledwie 16,2 kg oraz ramie o wadze 9,9kg po złożeniu do transportu. Łatwe do podniesienia bez żadnego wysiłku.





# PRZYJEMNOŚĆ JAZDY



## Kontroler

Kontroler P&G jest taki jaki lubimy w **VERMEIREN** – użyteczny i sensowny. Dzięki wskaźnikowi stanu akumulatora, regulacji prędkości i wygodnemu joystickowi jest łatwy w użyciu. Możliwe jest również podstawowe programowanie.

Kontroler można łatwo zdemontować przy rozkładaniu i zamontować podczas składania Verso.



## Do 21 km

Doświadcz większego zasięgu jazdy dzięki akumulatorowi 17,5 Ah. Wybierz baterię, która odpowie na Twoją potrzebę jazdy bez oglądania się za siebie!



## 6 km/h

Dzięki prędkości 6 km/h Verso pozwala na jazdę z idealną prędkością do komfortowych rozmów i spacerów z przyjaciółmi i rodziną.



# AKUMULATOR – SILNIKI

Akumulator litowo-jonowy (dostępny w pojemnościach 12,8 Ah lub 17,5 Ah) posiada wskaźnik stanu naładowania i jest lekki. Z łatwością zabezpieczysz go za pomocą własnego klucza antykradzieżowego i naładujesz w dowolnym miejscu. Nie masz czasu na ładowanie? Opcjonalnie dostępny jest dodatkowy akumulator.

Akumulator jest dogodnie umiejscowiony z tyłu wózka, co zapewnia łatwy dostęp, gdy trzeba go wyjąć w celu naładowania lub szybkiego sprawdzenia stanu.

Dzięki silnikom 2x 250 W i 12-calowym czarnym oponom PU Verso śmiało konkuruje z innymi w swojej kategorii. To świetny i trwały wybór elektrycznego wózka inwalidzkiego do codziennego użytku.

Wyjmowany  
akumulator  
litowo-jonowy

12,8 Ah - 24 V  
17,5 Ah - 24 V

Silniki  
2x 250 W





**CAUTION** Store in cool and dry place  
Do not expose the product to fire, water or moisture

100%	80%	50%	20%
------	-----	-----	-----

A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black with a blue rectangular plate in the center that has the word 'Verso' written on it in a stylized, embossed font. The background is blurred, showing other parts of the bicycle, including a blue brake lever and a black frame.

# WZORNICTWO I KOLORY

Dzięki eleganckiemu wzornictwu i żywym akcentom kolorystycznym Verso można dostosować do własnych preferencji, zachowując jednocześnie nowoczesny i atrakcyjny wygląd. Akcenty kolorystyczne służą podwójnemu celowi - ponieważ pozwalają też łatwo zlokalizować dźwignie części napędowej lub przednich widelców.

# KOLORY

Kolory są osobistym wyborem, tak jak Twój VERSO. Wybierz kombinację kolorów, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i osobowości!

Wybierz kolor: lśniący niebieski, lśniący zielony lub lśniący pomarańczowy aby pasował do Ciebie i Twojego stylu!

## Dostępne kolory

• Verso •

lśniący niebieski

• Verso •

lśniący zielony

• Verso •

lśniący pomarańczowy

• Verso •

lśniący biały





## WYSOCE KONFIGUROWALNY

Dostosuj swoje Verso do siebie. Verso to wózek o dużych możliwościach konfiguracji, który łączy w sobie szeroką gamę opcji firmy **VERMEIREN** oraz naszą wiedzę na temat wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada!

# DWA W JEDNYM

ZAMIEŃ VERSO W RĘCZNY WÓZEK INWALIDZKI

## ZESTAW kół 24"

Verso oferuje wyjątkową opcję dla osób potrzebujących zarówno ręcznego jak i elektrycznego wózka inwalidzkiego. Dzięki naszemu zestawowi 24-calowych kół możesz z łatwością przełączać się pomiędzy jazdą ręczną lub elektryczną.

Podłącz i jedź! Jest to wyjątkowo przydatne rozwiązanie gdy znajdziesz się w sytuacji w której nie potrzebujesz napędu elektrycznego np. będąc ze swoim opiekunem na krótkiej wizycie w sklepie w czasie dłuższej podróży czy na chwilowym postoju na stacji benzynowej.

Dzięki temu oszczędzisz baterię przed czasem w którym będziesz jej bardziej potrzebował a dużo niższa waga kół ręcznych niż napędu elektrycznego i prostota ich montażu usprawni działanie w podobnych sytuacjach Tobie czy opiekunowi.



# OPCJE

Dzięki bardzo dużemu wachlarzowi opcji Verso idealnie dopasuje się do indywidualnych potrzeb, Twoich jak i opiekuna. Skonfiguruj wózek według swoich potrzeb, korzystając z naszej szerokiej gamy opcji jak w znanej i sprawdzonej serii wózków manualnych V.



Więcej możliwości. Zapoznaj się z lokalnym formularzem zamówienia.



## DANE TECHNICZNE

■ Całkowita szerokość	Wysokość siedzenia + 17cm
■ Długość całkowita	1078 mm
■ Wysokość siedziska	521 mm
■ Szerokość siedziska	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Głębokość siedziska	420 a 480 mm
■ Wysokość oparcia	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Baterie	12,8 Ah - 24 V   17,5 Ah - 24 V
■ Silniki	2 x 250 W
■ Prędkość maksymalna*	6 km/h
■ Zasięg*	15 km   21 km
■ Waga	31,3 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	130 kg

\* Zasięg jazdy obliczono zgodnie z normami europejskimi. \* Prędkość i zasięg mogą się różnić (ok. 15%).  
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5°. Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Obrazy wyłącznie w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne



# Versto

Lekki, adaptowalny  
wózek inwalidzki z  
napędem elektrycznym

## VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska

[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)  
[info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)



R.E.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgia - 01/2025

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

**VERMEIREN**  
we care for you